



ALERJENLER

Making Testing Easier



Proteon Express & Lab2Go Bilgilendirmesi

**Alerjen kontrolü yapmayı düşünüyor ancak nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz?*

**Üretim hatlarınızdaki temizliği denetlemek ve ürünlerinizin güvenli bir şekilde hazır hale geldiğini bilmek ister misiniz?*

**IFS, BRC, ISO 22000 2005 Standartlarından birini uyguluyor musunuz?*

Proteon Express ve Lab2Go ile sadece 10 dakikada ekipmansız olarak alerjen testinizi yapıp, iyileştirici faaliyetlerinize başlayabilirsiniz.


Lab2Go çanta formatında ve Proteon Express hızlı kit formatında istediğiniz zaman ve yerde alerjen analiz ihtiyacınızı hızlı ve basit şekilde çözebilecektir. Üretim aşamasında kritik kararlarınızda, yetersiz temizlik tespiti, kontaminasyon noktalarınızın kontrolünde ve ürününüzün risksiz bir şekilde piyasaya sürülmesinde kitlerimiz ekibinizin bir parçası haline gelecektir.

HIZLI :


- * 10 Dakika içinde sonuç bildirimi
- * Tek Adımda tahlil
- * Sonucu görsel olarak takip edebilme

KOLAY:


- * Herhangi bir kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi kolaydır.
- * Laboratuvar olmadan, testi ihtiyacınız olan yerde gerçekleştirin.
- * Testi gerçekleştirmek için kittede bulunan tüm malzemeler sunulmaktadır.

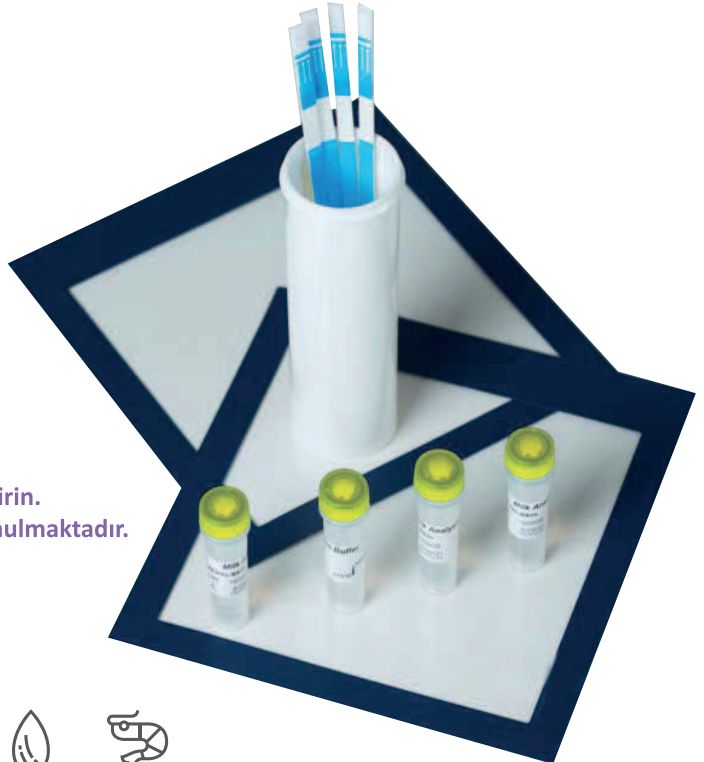


TEST PROSEDÜRÜ

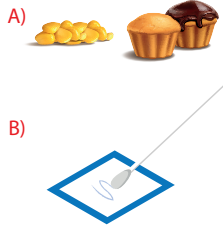

1. Ürün Ekstraksiyonu:
Doğrudan gıda (A) veya Yüzeyden
swapla numune alımı(B)

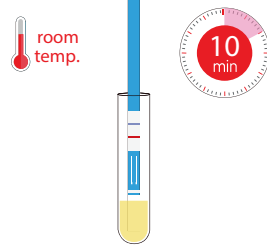

2. İnkübasyon
Oda sıcaklığında 10 dakika stripi bekletme

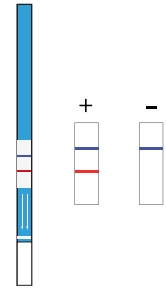

3. Sonuçlar:
Sonuçların okunması.

TEKNİK BİLGİLER

Alerjenler	Gıdalardan alınan numunelerdeki tespit limiti	Yüzeylerden alınan numunelerdeki tespit limiti	Analiz süresi (dk.)
Süt (B-lactoglobulina/Caseína)	0,25 y 2 ppm ⁽¹⁾	0,7 ug	10
Yumurta	0,5 ppm ⁽²⁾	0,25 µg	10
Gluten	3 ppm ⁽²⁾	1 µg	10
Kabuklular	1 ppm ⁽²⁾	4 µg	10
Fındık	0.6 ppm ⁽²⁾	1 µg	10
Balık	2 ppm ⁽²⁾	0,25 µg	10
Soya	1,2 ppm ⁽²⁾	0,7 µg	10
Badem	0,7 ppm ⁽²⁾	0,9 µg	10

⁽¹⁾ Belirtilen süt konsantrasyonunda ifade edilen veriler.

⁽²⁾ Toplam protein konsantrasyonunda ifade edilen veriler

MATRIX:



ÇALIŞMA YÜZEYİ



GIDA



DURULAMA SUYU

DOĞRULAYANLAR:




Appendix M. AOAC 2012

Appendix F. AOAC 2016

SMPR 2016.002. AOAC



PROTEON EXPRESS KIT
(yiyecek, durulama suyu ve yüzeyler)

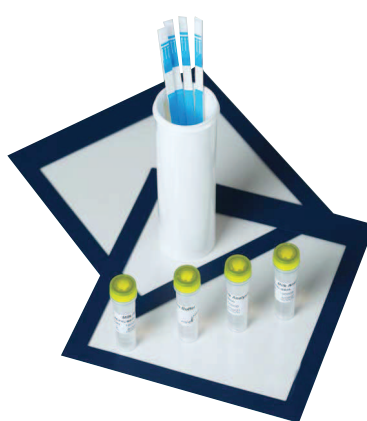

PROTEON EXPRESS SWAP KIT
(yüzeyler)



LAB2GO BRIEFCASE
(yüzeyler)

